

## دستگاه قالب گیری بافت (بلوکه کردن بافت) تیشو امبدینگ مدل TE100 پویا ابزار آزما

- دارای مخزن ذوب پارافین از جنس استیل ضد زنگ با ظرفیت ۳/۵ لیتر
- توانایی تنظیم دمای مخزن ذوب از دمای محیط تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد
- توانایی تنظیم صفحه گرم کننده از دمای محیط تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای هات پلیت از جنس آلومینیوم آنادایز شده به ابعاد ۲۷×۳۲ cm
- دارای نازل خروجی مجهز به شیر برقی قابل کنترل با فوت سوئیچ
- دارای فوت سوئیچ (پدال پایی) برای استفاده آزادانه از دو دست
- دارای کثو زیر صفحه گرم کننده برای جمع آوری پارافین اضافی
- دارای المنت گرمکن (هیتر) جداگانه برای شیر نازل خروجی پارافین
- دارای هولدر فورسپس شش خانه از جنس آلومینیوم و چراغ روشنایی LED
- دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال صفحه گرم کننده و مخزن ذوب پارافین
- دارای نمایشگر LED برای مشاهده دماهای تنظیم شده و دماهای واقعی
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره کلیه تنظیمات دستگاه
- دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

## TE100 Tissue Embedding Unit


**TE100** is composed by paraffin container, dispensing unit, heated working area. The ergonomically elevated heated working area is illuminated with LED light and allows comfortable processing of specimen.

**TE100** LED display of control panel; you can visualize all the temperatures. The user is allowed to set the parameters through the menu function.

**TE100** easy-to-operate control panel consists of a membrane keyboard with push button for instrument

**TE100** is equipped with:

- Paraffin melting tank made of stainless steel, max capacity 3.5 liter
- Hot plate to perform embedding operations, equipped with canals to collect and drain excess paraffin in to drawer, made of anodized aluminum (27x32cm)
- Paraffin dispenser with metering knob for a constant flow rate regulation. The working area is properly illuminated by a cold light source
- Foot switch for paraffin flow activation without using operator's hands
- Heating forceps holders on both sides of Paraffin dispenser

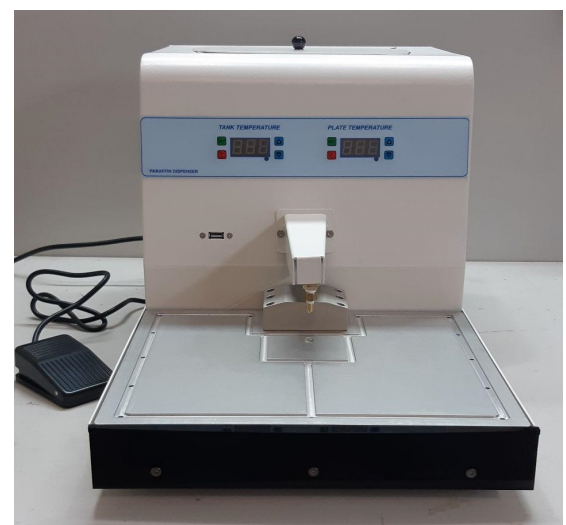

تهران  
ازکالای  
پویا

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۲۷۷۳۰ - فکس: ۰۲۱-۸۸۴۹۴۲۶۶ - تلفن همراه: ۰۲۱-۵۳۷۳۲۷۸-۹۱۲  
[www.labset.ir](http://www.labset.ir)    [sales@labset.ir](mailto:sales@labset.ir)  
 @Pathology\_equipment کانال تلگرام    [Pathology.equipment@gmail.com](mailto:Pathology.equipment@gmail.com) ایمیل

