

هات پلیت (صفحه گرم کننده) مدل SD100 پویا ابزار آزما

- تنظیم دمای صفحه گرم کننده تا +۹۰ درجه سانتیگراد
- ابعاد صفحه گرم کننده ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر
- صفحه نمایش LCD برای مشاهده دمای تنظیم شده
- کنترل پنل برای تنظیم دستگاه به صورت دیجیتال
- پوشش سیاهرنگ برای سهولت استفاده و نظافت
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره کلیه تنظیمات دستگاه
- دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

SD100 Hot Plate (Tissue Slide Dryer)


SD100 Tissue Slide Dryer is designed for drying of wet slides after transfer of stretched paraffin sections in histology, pathology and research laboratories.

SD100 Tissue Slide Dryer aids in the preparation of microscope slides at the specimen mounting stage.

SD100 Tissue Slide Dryer is controlled by a thermoregulator equipped with easy to operate control panel consists of a membrane keyboard with push button for instrument setting. The function of memorization keeps the set temperature automatically after startup. Through LCD display of control panel, you can visualize presetting temperature and current temperature. The user is allowed to set the temperature through the menu function. The silicone rubber mat element heater provides heating up to 90 °C, and the temperature is controlled from ambient to 90 °C by a built-in energy regulator. The scratch resistant black coated working surface is ergonomically designed and easy to clean.

Technical Specifications:

- Range of setting temperature: ambient to 90 °C
- Precision: ± 1 °C
- Voltage: AC 230 V
- Frequency: 50 Hz
- Power: 200 W
- Operating temperature range: from +5 °C to +40 °C
- Maximal humidity percentage: max 80%

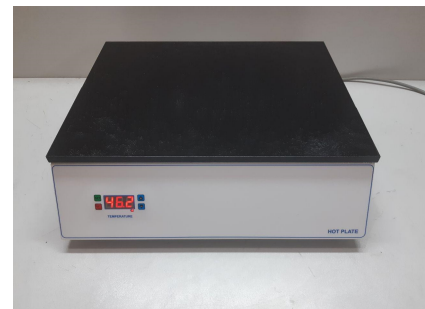

تهران
ازکالای
تهران

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۳۲۷۷۳۰ - فکس: ۰۲۱- ۸۸۴۹۴۲۶۶ - تلفن همراه: ۰۹۱۲-۵۳۷۳۲۷۸

www.labset.ir sales@labset.ir

Pathology.equipment@gmail.com ایمیل @Pathology_equipment کانال تلگرام

